



E-09-009-001

1536/384/96孔全自动移液工作台

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 高速自动多任务滴液/移液装置 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

1536微孔板，使用一次性吸头完成0.1 μ L的分液

ADS384-8



MedicaTec Corporation

101100 北京市通州区八里桥南街68号京贸国际E座2901室

电话:010-89506062 移动:15110235386

URL:<http://www.medicattec.cn>

E-mail:zhangxiang@medicattec.cn

340-0816 日本国奇玉县八潮市中央1丁目11-28

Tel:+81-48-997-2305 Fax:+81-48-997-6989

URL:<http://www.medicattec.co.jp>

 美滴 科技有限公司

ADS-384-8


可处理1536孔微孔板，使用一次性吸头能完成0.1 μ L的分液，微孔板盖自动打开/关闭

产品特征

- 可装载4台深孔板自动供给收纳机构，每台可收纳标准微孔板（14~16mm厚）50块
- 一次性吸头台自动装载机构支持吸头的连续更换
溢流清洗槽，条形码扫描器，微孔板震动器，真空吸引台，
试剂自动填充机构，冷却-加热机构，搅拌机构，吸头废弃箱，其他OEM
- 配备微孔板振动混合装置（无级变速）
- 外部PC程序使机器操作环境更加人性化，可对应多种通信协议



1. 使用96/384超微量一体化液头可处理1536孔板（96ch10~300 μ L液头不可）
2. 新型机器手可以实现微孔板在工作台之间的移动，以及微孔板盖得打开/关闭
3. 可处理深孔板，最多可装载4台微孔/深孔板自动供给收纳机构，每台可收纳标准微孔板（14~16mm厚）50块
4. 一次性吸头台自动装载机构支持吸头的连续更换
5. 为各种自动化操作配备了诸多的选件
溢流清洗槽，条形码扫描器，微孔板震动器，真空吸引台，试剂自动填充机构，冷却-加热机构，拌机构，吸头废弃箱，其他OEM
6. 外部PC程序使机器操作环境更加人性化，可对应多种通信协议

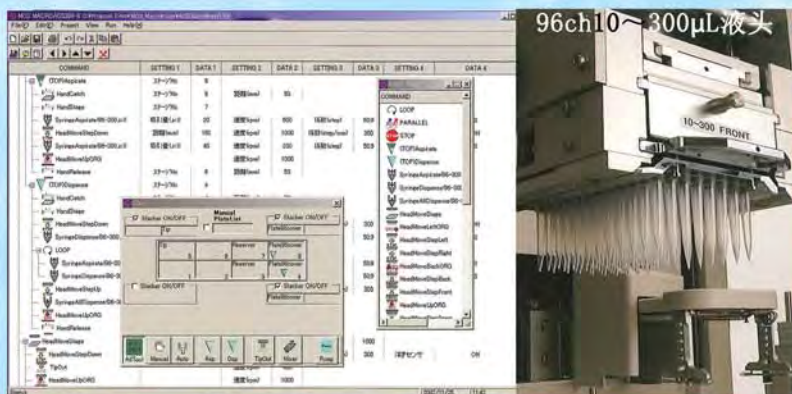

产品规格

| | |
|------|---|
| 使用环境 | 10℃~+50℃（无冷凝），湿度85%以下 |
| 滴液量 | 0.1~10 μ L, 0.5~30 μ L, 10~300 μ L（仅96ch） |
| 可处理板 | 1536/384/96微孔，深孔板 |
| 外形尺寸 | 1440(W)×710(D)×10760mm(H)（4收纳机构） |
| 重量约 | 210Kg |
| 电源 | AC220V |